

Manual de Operação

Buzzy™ e VibraCool™

Modelos: Buzzy XL, Buzzy Mini, VibraCool XL

877.805.2899

US Patented British Patent No. 2455695

RM-1910, 1248-064-5002-00, 1248-064-5001-00

MS: 81150720001, 81150729001, 81150729002

Esses produtos foram desenvolvidos por médicos especialistas em dor com o objetivo de diminuição temporária de dores e lesões.

Esses dispositivos mostram-se eficazes para uma série de procedimentos e/ou tratamentos incluindo:

- INJEÇÕES
- VACINAÇÃO
- DORES MUSCULARES
- LESÕES MUSCULARES
- TÚNEL DO CARPO
- FOBIA DE AGULHAS
- CONTROLE DA DOR
- FASCITE PLANTAR

INDICAÇÕES DE USO:

Controle de dores associadas com injeções (punção venosa, acesso intravenoso, procedimentos cosméticos) e o alívio temporário de pequenas lesões (musculares ou tendões, farpas, picadas de insetos). Destina-se, também, para controle da dor mio facial causada por pontos de gatilho, movimentos restritos e tensão muscular. Dobre as bolsas de gelo e guarde-as no congelador. As bolsas de gelo devem estar congeladas para melhor efeito. O Buzzy vem com duas bolsas de gelo azuis e uma alça amarela para você utilizá-lo com as mãos livres. O VibraCool vem com duas bolsas de gelo azuis e uma cinta de velcro para você utilizá-lo com as mãos livres. Esses equipamentos também são vendidos separadamente.

ATENÇÃO: Apenas para uso descrito acima. Aplicação direta ou prolongada de gelo pode ocasionar vasoconstrição ou alterar exames laboratoriais.

CONTRA INDICAÇÕES: Não utilizar na presença de dores inexplicáveis na panturrilha. Consulte sempre o seu médico. Não utilizar em áreas inchadas, inflamadas ou em erupções cutâneas. Não colocar diretamente sobre queimaduras. Não usar as bolsas de gelo em pessoas com alta sensibilidade ao gelo ou frio (ex.: Doença Falciforme, Doença de Raynaud).

ALERTA: Guardar o dispositivo em local fresco e seco.

BOLSAS DE GELO: As bolsas de gelo permanecerão congeladas por 10 minutos em temperatura ambiente. Para melhor resultado, as bolsas devem estar congeladas (estado sólido) para evitar a absorção das vibrações. Posicionar o lado azul diretamente na pele trará uma sensação

entorpecente maior. Se você é sensível ao frio, use o lado mais suave da bolsa de gelo.

DICA: Mantenha sempre todas as bolsas de gelo congeladas. Isso o ajudará em casos e vários procedimentos e/ou na diminuição da sensação de ardor causada por alguns medicamentos.


INSTRUÇÕES DE USO: Antes de utilizar o seu dispositivo, prenda a bolsa de gelo usando o cordão de silicone (VibraCool e Buzzy XL) ou encaixe-as no gancho (BuzzyMini) na parte traseira do dispositivo. Aperte o botão na parte superior do dispositivo para ele começar a vibrar. Use o dispositivo somente sobre a pele limpa e cicatrizada.



DICA: Posicione a extremidade maior do dispositivo próximo ao local do procedimento.

PARA CRIANÇAS ACIMA DE 3 ANOS: Para melhores resultados, deixe a criança segurar o dispositivo antes do procedimento. Deixe que a criança fique familiarizada com o dispositivo e, também, deixe-a escolher se quer as bolsas de gelo ou não.

POSICIONAMENTO: Nos casos de dores e lesões posicionar o dispositivo diretamente sobre a área dolorida/lesionada. Para procedimentos, o bloqueio fisiológico do dispositivo funciona melhor quando posicionado "entre o cérebro e a dor". Nos braços e nos ombros, os nervos correm a partir dos dedos aos ombros até a coluna vertebral. No peito e nas costas, os nervos correm a partir do peito e/ou da região abdominal de forma horizontal em direção as costas. Nas coxas, os nervos correm de forma diagonal da parte interna da coxa em direção a coluna.

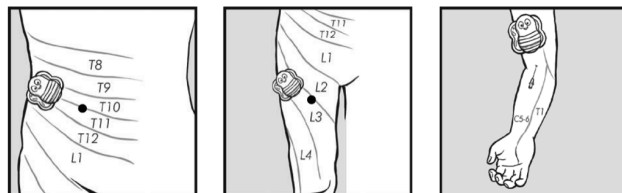

INJEÇÕES: Colocar as bolsas de gelo (estado sólido) no dispositivo, ligá-lo para ativar a vibração e posicioná-lo no local do procedimento. Deixe o dispositivo atuar por 30 segundos (agulhas pequenas) - 60 segundos (agulhas maiores/procedimentos mais profundos). Antes de efetuar a assepsia no local da picada, mova o dispositivo um pouco para cima do local do procedimento (entre a picada e o cérebro). Pressione o dispositivo e finalize o procedimento com a injeção. Nos casos onde a criança irá ser vacinada/imunizada sentada, indica-se que um dos pais segure o dispositivo no braço da criança conforme a segunda ilustração abaixo.



DORES E LESÕES: Posicionar o dispositivo diretamente na região dolorida, lesionada, ou no ponto-gatilho facial por 10 minutos ou mais, conforme indicado pelo seu médico e/ou fisioterapeuta. Não é recomendado o uso do dispositivo por mais de 20 minutos. Manter o dispositivo posicionado na região de preferência fazendo uso do torniquete amarelo (Buzzy Mini) ou da fita de velcro (Buzzy XL e VibraCool) mantendo, dessa forma as suas mãos livres. Para cotas, ombros e dores no quadril posicione-o entre a roupa (apertada) e a região dolorida. Mantendo, dessa forma, o dispositivo sobre a região dolorida/lesionada.

INJEÇÕES NA REGIÃO DO ABDOME:

Posicione o dispositivo lateralmente à região do procedimento. Ou seja, seu umbigo, o local onde será dada a injeção e o dispositivo.



SENSAÇÃO DE ARDOR E COCEIRAS: Como qualquer outra terapia com gelo, o dispositivo pode ser útil para sensações de ardor e coceiras. Em casos de picadas de insetos ou para aliviar a sensação de queimação causada por alguns medicamentos, coloque as bolsas de gelo (em estado sólido) no dispositivo, ligue-o e massageie a área afetada até que você se sinta melhor. **NUNCA** coloque o dispositivo diretamente sobre regiões do corpo que sofreram queimaduras.

PICADA NOS DEDOS OU REMOÇÃO DE FARPAS:

Colocar as bolsas de gelo (estado sólido) no dispositivo, ligá-lo para ativar a vibração e pressione-o na palma da mão com a extremidade maior apontada em direção aos dedos. Deixe o ligado durante todo o procedimento (aspepsia, picada ou retirada da farpa).



PROCEDIMENTOS INTRAVENOSOS E

FLEBOTOMIA: Coloque as bolsas de gelo em estado sólido no dispositivo. Ligue-o e posicione-o acima do local do procedimento. Pressione-o nesse local ou prenda-o com um torniquete para garantir que ele não irá se mover durante o procedimento. Não o posicione diretamente sobre o local do acesso. Vide figuras abaixo:



LIMPEZA: O Buzzy e o VibraCool são dispositivos para uso individual. Os dispositivos podem ser limpos com lenços umedecidos à base de álcool. Não autoclavável. Não os mergulhe em líquidos. As bolsas de gelo quando sujas devem ser descartadas e substituídas.

BATERIAS: As pilhas tem uma vida útil de cerca de 20 horas quando usadas no Buzzy e no VibraCool. Para obter o melhor resultado possível, substitua as pilhas quando a vibração começar a enfraquecer. Usando uma chave de fendas Phillips, desparafuse o painel traseiro do seu aparelho e substitua as pilhas. O seu dispositivo usa pilhas alcalinas AAA. Retire as pilhas caso o seu dispositivo não está sendo utilizado por um período prolongado. Para melhores resultados, use sempre pilhas alcalinas, não misture pilhas novas com velhas; não misture pilhas alcalinas com de níquel ou com pilhas recarregáveis. Pilhas velhas devem ser recicladas. Não as descarte em lixos comuns.

COMO COMPRAR/INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Visite os nossos sites www.buzzy4shots.com.br e www.vibracool.com.br e você encontrará todas as informações sobre uso dos nossos produtos, dicas sobre o controle da dor, vídeos com demonstrações de como usar os dispositivos, lista de acessórios, peças sobressalentes e muito mais!

GARANTIA: Conforme o Código de Defesa do Consumidor, você tem até 30 dias, a partir da data da Nota Fiscal, para reclamar de problemas com o produto. A partir da sua reclamação temos 30 dias para sanar o problema do produto. Nos casos de compras virtuais, você tem 7 dias, a contar da data de entrega, para avaliar se o produto recebido atende às expectativas prometidas pelo site de compras. Nesse prazo você pode desistir da compra e receber o seu dinheiro de volta, sem que tenha que arcar com qualquer custo.